

Bacteriën, opgepast!

Krachtige, snelle en effectieve wondverzorging

 **smith&nephew**

ACTICOAT[®]
MOISTURE
CONTROL

Antibacterieel barrièrekompres

with SILCRYST[®]
NANOCRYSTALS



ACTICOAT[◊] Moisture Control, het nieuwe schuimverband met SILCRYST[™] Nanokristallijn zilver

Het ACTICOAT assortiment - speciaal voor de behandeling van geïnfecteerde wonden - is uitgebreid met ACTICOAT[◊] Moisture Control: Een combinatie van de antimicrobiële voordelen van Nanokristallijn Zilver met een schuimverband, voor een optimale vochtbalans.

Pakt bacteriën hard aan

Unieke Nanokristallijn Zilver technologie

Gepatenteerde technologie met bewezen antimicrobiële werking.

Pakt bacteriën hard aan

Nanokristallijn Zilver is effectief tegen meer dan 150 pathogenen inclusief MRSA* (*in-vitro*)¹.

Snelle en landurige werking

Bacteriedodend effect binnen 30 minuten² en gegarandeerde zilverafgifte gedurende 7 dagen³.

Optimale vochtbalans

Hoog absorberend vermogen

Het schuimkompres absorbeert extreem veel en houdt het exsudaat vast in de microscopische structuur, ook onder compressie!

De waterdichte topfilm zorgt voor bescherming van buitenaf. Dankzij de hoge waterdampdoorlaatbare eigenschappen van de topfilm kan het kompres veel vocht verwerken.

Eenvoudig in gebruik

Compleet kompres waardoor geen secundair verband meer nodig is. Het is op elke gewenste maat te knippen. Door de visuele vochtdoorslag kan het kompres tijdig verwisseld worden.

Zacht en comfortabel

Het kompres is zacht en polsterend, hetgeen uiterst comfortabel is voor de patiënt en bijdraagt aan drukverlichting.

Indicaties

ACTICOAT Moisture Control

Een antimicrobieel absorberend barrièrekompres geschikt voor oppervlakkige of diepe wonden zoals: decubitus wonden, veneuze ulcera, diabetische ulcera, brandwonden, donorsites en transplantatiewonden.

Contra-indicaties

ACTICOAT Moisture control

Niet gebruiken bij patiënten die overgevoelig zijn voor zilver.

Niet gebruiken bij patiënten die een MRI scan ondergaan.

Referenties

1. Westaim (Sherritt) Report Ref: 93/001 'Broad Spectrum Efficacy.'
2. Smith & Nephew Data On File. Ref: 0504001.
3. Smith & Nephew Data on file. Ref: 0503006.

* Methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA).


[†] Nanokristallijn Zilver is een gepatenteerde technologie van NUCRYST Pharmaceuticals Corp.

[™] SILCRYST is een handelsmerk van NUCRYST Pharmaceuticals Corp., gebruikt in licentie.

[◊] Handelsmerk van Smith & Nephew

Waterdichte waterdampdoorlaatbare topfilm

Hoog absorberende
schuimkern

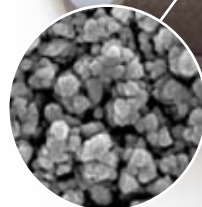

Nanokristallijn[†] Zilver
(50.000x vergroot)

Niet verklevende
wondcontactlaag

ACTICOAT[◊] Moisture Control

Bestelnummer	Afmeting	Verpakking
66001790	5 x 5 cm	10
66001791	10 x 10 cm	10
66001792	10 x 20 cm	10

Wondverzorging

Smith & Nephew B.V.
Postbus 525, 2130 AM Hoofddorp
Kruisweg 637, 2132 NB Hoofddorp
T 020 - 654 39 99
F 020 - 653 20 99
E holland.info@smith-nephew.com

www.smithnephew.nl
www.acticoat.com